



Stoma  
Skin  
Soul



やわらかい凸面で  
腹壁をやさしく  
おさえる

## ダンサック

### ノバライフ2 TRE フィット リング(軟性凸面型面板) 発売

患者様が求めるフィット感を実現する、柔軟性と追従性に富んだTRE皮膚保護剤

- 快適でありながら確かな支持性を実感できる、やわらかさと柔軟性
- 必要な部位に適度な圧をかけて漏れをさらに防止
- 面板とストーマ袋の確実な噛み合わせで、交換操作も安心
- お肌の健康を守るTREテクノロジーの3つの特長  
ーpH緩衝作用、吸水性、粘着力
- 一人ひとりの生活スタイルに合う使いやすさを追求



快適性、柔軟性、お肌の健康をすべて実現  
患者様のお肌の健康を守るために

dansac 

## 二品系面板の新製品、ノバライフ2 TRE フィット リング

単品系装具として実績があるノバライフ1 TRE フィットの長所をすべて備えながら、患者様それぞれの生活スタイルにさらに幅広く対応できるようになりました。

### ノバライフ2 TRE フィット リング

#### 柔軟性

身体の自然な動きを妨げない柔軟性を  
実現しました

皮膚保護剤の厚さはわずか  
0.7mm(ハイドロコロイド製の  
当社GX親水性皮膚保護剤では  
1.1mm)。辺縁部に向かって  
0.3mmまで薄くすることにより  
皮膚への密着と軽い装着感を  
両立しています

#### やわらかさ


柔軟性と追従性に富んだやわらかい  
TRE皮膚保護剤が皮膚に密着します

やわらかく弾性に富む凸面の皮膚保護剤が  
適度な圧をかけて面板と腹壁の密閉をもたらし、  
漏れを防ぐとともにお肌の健康を守ります

#### 凸面形状

高さ6mmのやわらかい凸面がストーマを  
やさしく押し出します

凸面の高さで適度な圧がストーマの  
突出を助けます

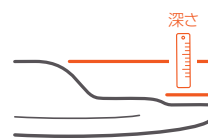

#### 利便性

面板をつけたままストーマ袋  
だけを取り替えることができます

フランジと皮膚保護剤の間に指が入る  
浮動型フランジにより、腹部への圧迫を軽減  
ストーマ袋を容易に装着できます



### 3つの特長でお肌を守る、ダンサックの TREテクノロジー

**pH緩衝作用** 皮膚のpHを適切に保つことによって消化酵素の  
活性化を抑え、お肌を守ります。

**吸水性** 排泄物や発汗など余分な水分を吸収して、お肌の自然な  
バランスを保ちます。

**粘着力** 皮膚への密着により、排泄物からお肌を保護。  
交換時も容易に剥離することができ、皮膚に負担をかけません。



| 製品番号    | カット    | フランジ<br>サイズ | ストーマ<br>サイズ |
|---------|--------|-------------|-------------|
| 3343-15 | フリーカット | 43mm        | 15~25mm     |
| 3343-25 | プレカット  | 43mm        | 25mm        |
| 3355-15 | フリーカット | 55mm        | 15~38mm     |
| 3355-30 | プレカット  | 55mm        | 30mm        |
| 3355-35 | プレカット  | 55mm        | 35mm        |
| 3370-15 | フリーカット | 70mm        | 15~52mm     |

患者様のお肌の健康を守るノバライフ2 TRE フィット リング(軟性凸面型面板)の詳細は、  
[www.dansac.jp](http://www.dansac.jp)でご確認いただけます。

ご使用前に必ず取扱説明書を読み、使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意、使用方法を確認してください。

Dansac, the Dansac logo, NovaLifeおよびTREはDansac A/Sの商標です。© 2022 Dansac A/S



dansac

2022年8月作成 | JPD292-202208HR10K